

OOSS THz 第一代光波仪 产品说明书

1. 介绍:

- 本产品说明书旨在为您提供关于“太赫兹光波理疗仪”（以下简称“产品”）的详细信息，以确保您能够正确、安全地使用该产品。请在使用前仔细阅读此说明书，并遵循所有的操作和安全指南。
- 请注意，此产品是一种电器产品，错误的使用可能会导致损坏或安全风险。因此，确保您理解并遵循此说明书中的所有说明。

2. 产品概述:

- 本产品具有先进的设计和功​​能，结合了太赫兹波及热能，旨在为您提供方便、高效的细胞理疗。主要功能包括促进细胞新陈代谢、提高细胞免疫力、延缓细胞衰老等等。
- 本产品不适用于：体内外有金属支架或含电磁功能产品者、急性病发作者、外力伤害所造成的骨折开放性伤口、患有心脏瓣膜缺损等先天疾病者。
- 请参考附带的图表，了解本产品各部件的名称和功能。

3. 技术规格:


- 电压：110-130v/220-250V
- 频率：50Hz/60Hz
- 功率：750W
- 尺寸：(长) 347mm
- 档位：1-3

4. 安全说明:

- 因本产品装有易碎的晶管，请小心处理本产品，避免敲击或掉落。
- 使用本产品时，不要堵塞进风口和出风口，以防过热。
- 请勿将本产品浸入水中或与其他液体接触，以防止电击。
- 使用本产品前请移除身上的所有金属附件。在面部使用前，请先摘除隐形眼镜。
- 使用本产品时，请确保插头和插座干燥，并正确插入。
- 在使用本产品时，避免将其近距离靠近任何身体部位，以免烫伤或其它伤害。
- 当不在使用本产品时，请拔掉电源插头。
- 请勿在户外使用本产品。本产品只供家庭使用。不要将产品用于其他用途。
- 不要使用本产品太长时间（**一次理疗不应超过 15 分钟**）。本产品配有可重置的热连接器，以保护电动机不会过热。如果电机过热，连接器将断开电源，并将自动重新连接电源后，电机冷却下来。
- 如果电源线损坏，必须由制造商、其服务代理商或类似的专业人员更换，以避免危险。
- 本产品不适用于身体、感官或智力能力低下或缺乏经验和知识的人士（包括儿童）使用，除非负责他们安全的人士已就使用该设备给予他们监督或指示。应该对儿童进行监督，以确保他们的人身安全。
- 打开本产品后，不要让它处于无人看管状态。
- 若本产品打开不了，处于在故障情况下。请联系各地的服务中心。

5. 组装和设置:

- 打开礼品盒后，取出两个部件。
- 在组装本产品之前，请确保断开电源，并检查所有零件是否完好。
- 如图，将（1）电子管对准箭头的部分安装到（2）底座，需要轻微旋转调整以确保它们牢固连接，两部分锁紧后会发出"咔嗒"声。
- 插入电源并拨动银色开关以调节档位及功率大小。

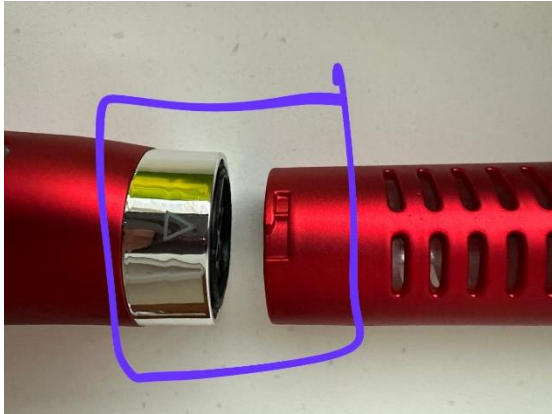

6. 操作说明及使用技巧:

- 1 档：高风速，低热能；2 档：低风速，中热能；3 档：高风速，高热能
- 在疗程开始和结束时，请喝一杯水/太赫兹水。
- 每次使用应持续 **15 分钟**。鼓励一天多次使用（3 至 5 次）。
- 多次使用过程中，每 15 分钟后，请确保本产品已完全冷却再继续使用。
- 在白天使用时，请从头到脚吹，吹五脏六腑，快速补充能量。
- 夜间使用时，请从膝盖吹至脚心，安神助眠。
- 在疼痛部位/主要脏腑/穴位，每个部位请吹至少 5 分钟。
- 在结束后，我们也鼓励您一起做实验，请默念：“请所有的负能量出体，请到 OOSS 祈祷堂。”

7. 维护和清洁:

- 定期检查本产品的电源线和插头，以确保没有磨损或损坏。
- 请勿使用化学清洁剂或溶剂清洁本产品及部件，以免损坏表面。

8. 故障排除:

- 若电子管已破碎或损坏，请联系各地的服务中心以便更换。
- 若（1）电子管及（2）底座无法顺利连接，请检查电子管内的透明晶管是否错位。
- 若进风口处与电线连接处有故障或使用时出现火花，请联系各地的服务中心以便更换。

9. 安全认证和合规性: (待定)

- 有关产品符合的任何安全认证或标准的信息。
- 符合相关法规和指南的信息。

10. 保修说明:

- 本产品保修期限为 1 年（从购买日当天起）。

- 在保修期内，凡属产品本身质量引起的故障，请您寄往各地的服务中心进行保修服务。
- 保修期满后，则由您承担保修费用，公司将提供维修和保养服务。
- 在下列情况下，保修无效：
 1. 超过保修期。
 2. 未按说明书的要求操作设备所引起的故障。
 3. 下列情况之一者不属于保修范围：
 - a. 消费者使用、保管、维护不当造成的损坏。
 - b. 非本公司指定维修部自行拆装修理而造成的损坏。
 - c. 因不可抗力造成的损坏。

11. 其他信息:

- 本产品环保使用期限：
本产品环境保护使用期限为 10 年。
环境保护使用期限指电子电器产品不会对环境造成严重污染或对人体、财产带来严重损害的期限。